

Afname instructie Soa test via urine.

U heeft een aanvraag gedaan voor de thuisafname van een test op een of meerdere Soa's. Hierbij heeft u een afname set gekregen. Om een juiste afname te nemen onderstaande instructie. Deze instructie zal u uitleggen hoe u deze afname thuis kunt doen en wat u daarna moet doen.


De afname is heel eenvoudig en duurt maar enkele minuten. In deze afname set treft u aan: een pipet (voor eenmalig gebruik); een buisje; een sealbag met een absorptie vel; een laboratorium aanvraagformulier en een retour verzendenvolp.

Volg deze stappen om de afname te doen:

- Urineer in een plastic opvangbeker, als het urinemonster niet onmiddellijk kan worden overgebracht, kan het maximaal 24 uur bij 2 tot 10⁰ C worden bewaard.




- Open de verpakking van de pipet door de folie aan de zijkant los te trekken. Open de Cobas®PCR Media-buis. Breng de urine over met behulp van de pipet.

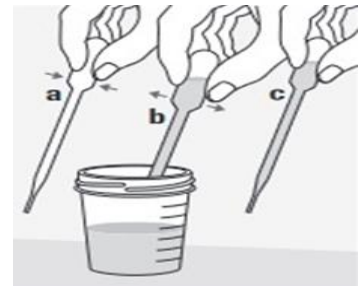

- Overbrenging: Het juiste volume is toegevoegd wanneer het vloeistof niveau zich tussen de twee zwarte lijnen op het buisetiket bevindt.



- Sluit de Cobas PCR-buis weer goed af. Roteer de buis 5 keer om zodat het geheel gemengd wordt. Het monster is nu klaar voor transport.

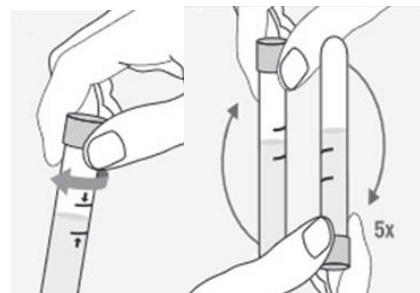

U bent nu klaar met de afname. U moet nu het buisje terugsturen naar het laboratorium voor analyse. Dit doet u als volgt:

- Vul het laboratoriumformulier in dat u heeft gekregen.
- Vermeld daar uw geboortedatum, geslacht en afnamedatum.
- Stop het buisje en het absorptievel in de sealbag die u erbij kreeg. Sluit de sealbag goed af. Doe het laboratoriumformulier ook bij de sealbag in de verzendenvelop.
- Stuur de verzendenvelop zo snel mogelijk terug naar het laboratorium via een PostNL brievenbus of een PostNL servicepunt. U hoeft geen postzegel te plakken, want de verzendenvelop is al gefrankeerd.
- U ontvangt binnen 10 werkdagen de uitslag via de aanvragende firma. Deze zal u ook verder kunnen helpen als u positief bent getest bent op een SOA.

Ik hoop dat deze instructies u hebben geholpen om de afname thuis te doen. Heeft u nog vragen over Soa's of de test? Zo ja, dan kunt u contact met ons opnemen . Zo nee, dan wens ik u veel succes en gezondheid toe.